

MiniSpacer\* Dual Spray Metered Dose Inhaler Adapter Bi-Directional Spray and Cap 22 mm O.D. ISO Connections Accepts plastic and metal pMDI canister stems, including canisters with integrated dose counters.

#### INDICATIONS FOR USE

Model number 1024 is a single patient, disposable device for dispensing pressurized metered dose inhaler (pMDI) medication into a breathing circuit, as prescribed by a physician or other licensed health care practitioner. The device is indicated for patients on a breathing circuit, for whom aerosol medication has been prescribed, in short and long term critical care environments. REF 1024 is intended for use only when connected to a 22 mm fitting.

#### DIRECTIONS FOR USE

**Installing the MINISPACER Adapter in the Patient Circuit**

- Remove the MINISPACER adapter from package.
- Connect the MINISPACER device to the inspiratory limb of the patient circuit, approximately 6 inches back from the patient wye or according to facility guidelines.

CAUTION : Ensure the tubing is secure over MINISPACER connectors when in use.

NOTE : When correctly installed, the MINISPACER MDI port will be vertical and the pMDI canister will point downward during treatment.

- Place the cap firmly on the MINISPACER port.

#### Administering MDI medication via the MINISPACER Adapter











- Uncap the MINISPACER MDI port.
- Insert the MDI canister stem into the MINISPACER port.
- Coordinate MDI actuation with the beginning of inspiration. CAUTION : Support the MINISPACER adapter while depressing the canister.
- Administer the dose as ordered.
- After medication has been delivered as prescribed, remove the pMDI canister and firmly cap the MINISPACER port.
- Monitor the patient response.


NOTE : Discard the MINISPACER adapter when replacing the circuit according to facility guidelines, not to exceed two weeks.


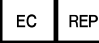
CAUTION: REF 1024 MINISPACER adapter will not increment the counter on pMDI canisters with integrated dose counters surrounding the stem.

WARNING : Do not clean and reuse or sterilize. Potential risks associated with cleaning and reusing, reprocessing and/or sterilization include: cross-contamination or infection resulting from inadequate cleaning, product degradation, and/or failure of the device to perform as intended.

#### Symbol Glossary

	Manufacturer		Consult instructions for use
	Use by Date		Authorized representative in the European Community
	Batch code/lot number		Prescription only. U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician or properly licensed practitioner.
	CE Mark		Do Not Reuse
	Catalog, reorder or reference number		Caution. The symbol can also be used to mean Attention, see Instructions for Use.

Item No.	Description
 1024	MiniSpacer® Dual Spray MDI Adapter, 22 mm O.D. / O.D.

	Thayer Medical Corporation 4575 S. Palo Verde Rd. Tucson, AZ 85714-1961 USA www.thayermedical.com Made in USA			MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany
--	---	---	---	---

MiniSpacer\* Adaptador de inhalador de dosis medidas Nebulizador bidireccional y tapa Conexiones ISO de 22 mm de D.E. / 22 mm de D.E. Acepta vástagos de cartuchos pMDI de plástico y metal, incluidos los cartuchos con contadores de dosis integradas

#### INDICACIONES DE USO

El modelo número 1024 es un dispositivo desechable de uso en un solo paciente para la dispensación de medicamento mediante inhalador presurizado de dosis medidas (pMDI) en un circuito de respiración, de la forma prescrita por un médico u otro profesional sanitario cualificado. El dispositivo está indicado para pacientes conectados a un circuito de respiración, a quienes se ha prescrito medicamento mediante nebulización, en áreas de cuidados críticos a corto y largo plazo. REF 1024 ha sido desarrollado para usar solo en una conexión de 22 mm.

#### INSTRUCCIONES DE USO

**Instalar el adaptador MINISPACER en el circuito del paciente**

- Sacar el adaptador MINISPACER del envase.
- Conectar el dispositivo MINISPACER en el lado inspiratorio del circuito del paciente, aproximadamente 15 cm antes de la pieza Y del paciente, o de acuerdo con las normas del centro.

ATENCIÓN : Asegurar que el tubo se ajusta firmemente a los conectores del MINISPACER cuando está en uso.

OBSERVACIÓN : Si está correctamente instalado, el puerto MDI del MINISPACER estará en posición vertical y el cartucho pMDI mirará hacia abajo durante el tratamiento.

- Colocar la tapa firmemente en el puerto del MINISPACER.

#### Administrar el medicamento MDI con el adaptador MINISPACER











- Retirar la tapa del puerto MDI del MINISPACER
- Insertar el vástago del cartucho MDI en el puerto del MINISPACER.
- Hacer que la actuación del MDI coincida con el inicio de la inspiración. ATENCIÓN : Sostener el adaptador MINISPACER cuando se presiona el cartucho.
- Administrar la dosis indicada.
- Tras administrar el medicamento de la forma prescrita, retirar el cartucho pMDI y colocar firmemente la tapa en el puerto del MINISPACER
- Monitorizar la respuesta del paciente.


OBSERVACIÓN : Desechar el adaptador MINISPACER cuando se reemplaza el circuito de acuerdo con las normas del centro, a más tardar en las dos semanas siguientes.

ATENCIÓN: El adaptador MINISPACER REF 1024 no incrementará el contador en los cartuchos pMDI con contadores de dosis integradas alrededor del vástago.

ADVERTENCIA : No limpiar ni reutilizar o esterilizar. Los potenciales riesgos asociados a la limpieza y reutilización, el reprocesamiento y/o la esterilización incluyen: contaminación cruzada o infección como consecuencia de una limpieza inadecuada, degradación del producto y/o fallo del dispositivo para funcionar de la forma prevista.

#### Símbolo Glosario

	Fabricante		Consultar las instrucciones de uso
	Fecha de caducidad		Representante autorizado en la Unión Europea
	Código de lote		Las leyes federales estadounidenses restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.
	Marca CE		No Reutilizar
	Número de referencia, de pedido o de catálogo		Precaución. Atención, ver Instrucciones de uso

Nº Ref	Descripción
 1024	MiniSpacer* Adaptador de inhalador de dosis medidas con nebulizador dual, 22 mm D.E. / D.E.

MiniSpacer\* Adaptateur à double pulvérisation pour inhalateur-doseur

Pulvérisation bidirectionnelle et bouchon

Raccords ISO 22 mm DE / 22 mm DE

Compatible avec les tiges de réservoirs de pMDI en plastique et en métal, y compris les réservoirs équipés de compteurs de doses intégrés

#### INDICATIONS D'UTILISATION

Le modèle no 1024 est un dispositif jetable à usage unique, conçu pour l'administration de médicaments par inhalateur-doseur pressurisé (pMDI) dans un circuit respiratoire, conformément à la prescription d'un médecin ou d'un autre professionnel de santé agréé. Le dispositif est indiqué pour des patients raccordés à un circuit respiratoire, auxquels l'administration d'un médicament en aérosols a été prescrite, dans des environnements de soins critiques à court terme et à long terme. Le modèle no 1024 doit uniquement être utilisé sur unraccord de 22 mm.

#### MODE D'EMPLOI

**Installation de l'adaptateur MINISPACER dans le circuit du patient**

- Sortir l'adaptateur MINISPACER de l'emballage.
- Raccorder le dispositif MINISPACER à la branche inspiratoire du circuit du patient, à environ 15 cm (6 pouces) de distance de la pièce en Y du patient ou conformément aux directives qui s'appliquent dans l'établissement.

ATTENTION : S'assurer que la tubulure est solidement montée sur les raccords du MINISPACER lorsqu'elle est en cours d'utilisation.

REMARQUE : Quand le dispositif a été installé correctement, l'orifice MDI du MINISPACER est vertical et le réservoir du pMDI est orienté vers le bas durant le traitement.

- Mettre le bouchon fermement en place sur l'orifice du MINISPACER.

#### Administration d'un médicament par MDI via l'adaptateur MINISPACER






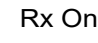



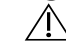
- Retirer le bouchon de l'orifice MDI du MINISPACER.
- nsérer la tige du réservoir du MDI dans l'orifice du MINISPACER.
- Faire coïncider le déclenchement du MDI avec le début de l'inspiration. ATTENTION : Soutenir l'adaptateur MINISPACER tout en appuyant sur le réservoir.
- Administrer la dose conformément aux instructions.
- Après avoir administré le médicament comme il a été prescrit, enlever le réservoir du pMDI et mettre le bouchon fermement en place sur l'orifice du MINISPACER.
- Surveiller la réponse du patient.

REMARQUE : Jeter l'adaptateur MINISPACER quand le circuit est remplacé conformément aux directives de l'établissement, après une période qui ne doit pas dépasser deux semaines.

ATTENTION : L'adaptateur MINISPACER RÉF 1024 n'incrémente pas le compteur sur des réservoirs de pMDI équipés de compteurs de doses intégrés autour de la tige.

AVERTISSEMENT : Ne pas nettoyer et réutiliser ni stériliser. Les risques potentiels as-sociés au nettoyage et à la réutilisation, au retraitement et/ou à la stérilisation compren-nent : une contamination croisée ou une infection résultant d'un nettoyage insuffisant, une dégradation du produit, et/ou l'incapacité du dispositif à fonctionner comme prévu.

#### Symbole Glossaire

	Fabricant		Consulter le mode d'emploi
	Date limite d'utilisation		Mandataire dans la Communauté européenne
	Code de lot		En vertu de la législation fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance médicale.
	Marquage CE		Ne pas réutiliser
	Número de catalogue		Mise en garde. Attention, consulter le mode d'emploi

No de réf	Description
 1024	MiniSpacer* Adaptateur à double pulvérisation pour inhalateur-doseur, 22 mm D.E. / D.E.

MiniSpacer\* Adattatore dual-spray per aerosol predosato pressurizzato

Sistema di erogazione spray bidirezionale, con tappo

Connessioni ISO 22 mm D.E. (diametro esterno) / 22 mm D.E.

Idoneo per l'uso con filtri pMDI dotati di steli in plastica e metallo, compresi i filtri completi di dispositivi di dosaggio integrati

#### INDICAZIONI PER L'USO

Il modello numero 1024 è un dispositivo monouso per singolo paziente, destinato al rilascio di aerosol predosati pressurizzati (pMDI) all'interno di un circuito respiratorio secondo le prescri-zioni fornite da un medico o da altro professionista sanitario autorizzato. Il dispositivo è indicato per i pazienti ventilati con circuito respiratorio per i quali è stata prescritta la somministrazione di farmaci in aerosol, in ambienti di terapia intensiva a breve e a lungo termine. Il modello 1024 deve essere utilizzato esclusivamente in connessione con raccordi da 22 mm.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

**Installazione dell'adattatore MINISPACER nel circuito respiratorio del paziente**

- Rimuovere l'adattatore MINISPACER dall'imballaggio.
- Collegare MINISPACER al braccio inspiratorio del circuito del paziente, approssimativa-mente a 15 cm (6 pollici) di distanza dal raccordo a Y o secondo le linee guida della struttura in cui si opera.

ATTENZIONE : durante l'uso, accertarsi che i tubi siano ben fissati ai connettori MINISPACER.

NOTA : se installato correttamente, durante il trattamento la porta MDI di MINISPACER dovrà essere in posizione verticale e il filtro pMDI dovrà essere rivolto verso il basso.

- Chiudere saldamente con il tappo la porta di MINISPACER.

#### Somministrazione dell'aerosol MDI attraverso l'adattatore MINISPACER

- Rimuovere il tappo dalla porta MDI di MINISPACER.
- Inserire lo stelo del filtro MDI nella porta di MINISPACER
- Coordinare la somministrazione dell'aerosol MDI con l'inizio dell'inspirazione.

ATTENZIONE : sostenere l'adattatore MINISPACER mentre si preme il filtro.




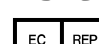

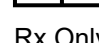




- Somministrare la dose secondo quanto prescritto.


- Dopo aver somministrato l'aerosol secondo le prescrzioni, rimuovere il filtro pMDI e chiudere saldamente con il tappo la porta di MINISPACER
- Monitorare la risposta del paziente.

NOTA: al momento della sostituzione del circuito smaltire l'adattatore MINISPACER in conformità con le linee guida della struttura in cui si opera, senza eccedere le due settimane. ATTENZIONE: l'adattatore MINISPACER non aziona il conteggio incrementale delle dosi quando utilizzato con filtri pMDI dotati di dispositivi di dosaggio integrati attorno allo stelo.

AVVERTENZA: non pulire e riutilizzare o sterilizzare. I rischi potenziali associati alla pulizia e al riutilizzo, al ricondizionamento e/o alla sterilizzazione comprendono: contami-nazione crociata o infezione derivanti da pulizia inadeguata, degradazione del prodotto e/o funzionamento non corretto del dispositivo.

#### Simbolo Glossario

	Fabbricante		Consultare le istruzioni per l'uso
	Data di scadenza		Rappresentante autorizzato nella Comunità europea
	Codice di lotto		Le leggi federali degli Stati Uniti d'America limitano la vendita di questo dispositivo al solo personale medico autorizzato o su prescrizione medica
	Marchio CE		Non riutilizzare
	Codice di lotto		Attenzione. Attenzione, consultare le istruzioni per l'uso

N. art.	Descrizione
 1024	MiniSpacer* Adattatore dual-spray per aerosol predosato pressurizzato, 22 mm D.E. / D.E.

MiniSpacer\* Dual-Spray Adapter für Dosieraerosole
Bidirectionales Spray und Verschlusskappe
22 mm AD / 22 mm AD. ISO-Anschlüsse
Geeignet für pMID-Behälterstutzen aus Kunststoff und Metall, einschließlich Behäl-tern mit integriertem Dosiszähler

#### ANWENDUNGSANLEITUNG

Bei Modell Nummer 1024 handelt es sich um eine Einwegvorrichtung für einen Einzelpa-tienten zur Freisetzung von Arzneimitteln aus einem unter Druck stehenden Dosieraerosol (pMDI) in ein Beatmungskreissystem nach Verordnung durch einen Arzt oder eine andere zugelassene medizinische Fachperson. Die Vorrichtung ist für Patienten an Beatmungskreis-systemen, denen das Aerosol-Arzneimittel verordnet worden ist, in Critical-Care-Einrichtun-gen für die Kurz- und Langzeitversorgung bestimmt. REF 1024 ist nur für die Anwendung in Verbindung mit einem 22-mm-Anschluss bestimmt.

#### ANWENDUNGSANLEITUNG

**Installieren des MINISPACE­R Adapters im Patienten-Kreissystem**

- MINISPACE­R Adapter auspacken.
- Den MINISPACE­R etwa 15 cm hinter dem Patienten-Y-Stück oder nach den Leitlinien der Einrichtung mit dem inspiratorischen Schenkel des Patientenkreises verbinden.

WICHTIGER HINWEIS : Sicherstellen, dass der Schlauch bei Gebrauch fest über den MINISPACE­R Konnektoren sitzt.

HINWEIS : Fachgerecht installiert, ist der MINISPACE­R Dosieraerosol-Konnektor während der Behandlung vertikal ausgerichtet und der pMDI-Behälter zeigt nach unten.

- Den MINISPACE­R Konnektor fest mit der Verschlusskappe verschließen.

#### Verabreichung des Dosieraerosol-Arzneimittels über den MINISPACE­R Adapter




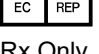

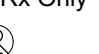



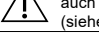
- Verschlusskappe vom MINISPACE­R Dosieraerosol-Konnektor entfernen.
- Den Stutzen des Dosieraerosol-Behälters in den MINISPACE­R Konnektor einführen.
- Die Aktivierung des Dosieraerosols so koordinieren, dass sie zeitgleich zum Beginn der Inspiration stattfindet.
- WICHTIGER HINWEIS : Den MINISPACE­R Adapter beim Drücken des Behälters festhalten.
- Die Dosis verordnungsgemäß verabreichen.
- Nach verordnungsgemäßer Verabreichung des Arzneimittels den pMDI-Behälter entfernen und den MINISPACE­R Konnektor wieder fest mit der Verschlusskappe verschließen.
- Die Reaktion des Patienten überwachen.


HINWEIS: Den MINISPACE­R Adapter beim Wechseln des Kreissystems entsprechend den Leitlinien der Einrichtung, aber spätestens nach zwei Wochen, entsorgen.

WICHTIGER HINWEIS: Der MINISPACE­R Adapter bewirkt bei pMDI-Behältern mit integriertem Dosiszähler am Stutzen keinen Zählvorgang.

WARNHINWEIS: Nicht reinigen und wiederverwenden oder sterilisieren. Reinigung und Wiederverwendung, Aufbereitung und/oder Sterilisation beinhalten folgende mögliche Risiken: Kreuzkontamination oder Infektion infolge von ungenügender Reinigung, Produktabbau und/oder Versagen der bestimmungsgemäßen Funktion der Vorrichtung.

#### Symbol Glossar

	Hersteller		Gebrauchsanleitung beachten
	Verfallsdatum		Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
	Chargenbezeichnung		<b>Rx Only</b> In den USA darf dieses Produkt nach den gesetzlichen Vorschriften nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden. o su prescrizione medica
	CE-Kennzeichnung		Nicht wiederverwenden
	Katalog-, Bestell- oder Referenz-Teilenummer		Vorsicht. Dieses Symbol kann auch für „Achtung“ stehen (siehe Gebrauchsanleitung).

Art. Nr.	Beschreibung
 1024	MiniSpacer* Adapter für Dosieraerosole 22 mm AD Anschlüssen

MiniSpacer\* Dual-Spray Dosisaërosol Adapter
Bidirectioneel sprayen en afsluiten
22 mm buitendiameter, ISO-verbindingen
Kan worden gebruikt met kunststof en metalen, dosisaerosolverstuivingsssystemen, waaronder verstuivers met geïntegreerde dosistellers

#### INDICATIES VOOR GEBRUIK

Modelnummer 1024 is een wegwerphulpmiddel voor één patiënt voor de afgifte van dosi-saerosolmedicatie (pMDI-medicatie) in een beademingscircuit, zoals voorgeschreven door een arts of een andere bevoegde medische beroepsbeoefenaar. Het hulpmiddel is geïndi-ceerd voor patiënten die op een beademingscircuit zijn aangesloten, aerosolmedicatie voor-geschreven hebben gekregen en kort- of langdurig op een intensiverecareafdeling verblijven. REF 1024 mag uitsluitend worden gebruikt indien aangesloten op een fitting van 22 mm.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

**Plaatsen van de MINISPACE­R adapter in het circuit van de patiënt**

- Haal de MINISPACE­R adapter uit de verpakking.
- Sluit het MINISPACE­R hulpmiddel aan op het inhalatiegedeelte van het circuit van de patiënt, ongeveer 6 inch vóór het Y-stuk van de patiënt of volgens de lokale richtlijnen.

LET OP : Zorg ervoor dat bij gebruik de slangen goed over de MINISPACE­R verbindingstukken zijn geschoven.

OPMERKING : Als het hulpmiddel correct is geplaatst, staat de MINISPACE­R houder van de MDI rechtop en wijst de pMDI-verstuiver naar beneden tijdens de behandeling.

- Plaats het kapje stevig op de MINISPACE­R houder.

#### Toedienen van MDI-medicatie via de MINISPACE­R adapter

- Haal het kapje van de MINISPACE­R houder van de MDI.
- Plaats de schacht van de MDI-verstuiver in de MINISPACE­R houder.
- Stel de MDI in werking bij aanvang van de inhalatie.

LET OP : Ondersteun de MINISPACE­R adapter bij het indrukken van de verstuiver.




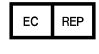




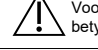
- Dien de voorgeschreven dosis toe.
- Verwijder, nadat de medicatie is toegediend zoals voorgeschreven, de pMDI-verstuiver en plaats het kapje stevig op de MINISPACE­R houder.
- Controleer hoe de patiënt reageert.


OPMERKING : Gooi de MINISPACE­R adapter weg wanneer het circuit wordt vervangen volgens de lokale richtlijnen, na maximaal 2 weken.

LET OP: De MINISPACE­R adapter verhoogt niet de teller op pMDI-verstuivers met een geïntegreerde dosisteller rond de schacht.

WAARSCHUWING : Niet reinigen en hergebruiken of steriliseren. Potentiële risico's in verband met het reinigen en hergebruiken, opnieuw verwerken en/of steriliseren kunnen onder meer bestaan uit: kruisbesmetting of infectie als gevolg van inadequate reiniging, kwaliteitsvermindering van het product en/of falen van de bedoelde werking van het hulpmiddel.

#### Symbol Woordenlijst

	Fabrikant		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Uiterste houdbaarheidsdatum		Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Partijnummer		<b>Rx Only</b> Krachtens de federale wetgeving (van de VS) mag dit product uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht. Verschreibung abgegeben werden. o su prescrizione medica
	CE-markering		Niet hergebruiken
	Catalogus-, bestel- of referentienummer		Voorzichtig. Symbool kan også bety OBS. Se i bruksanvisningen.

Artikelnr.	Omschrijving
 1024	MiniSpacer* Dosisaërosol Adapter 22 mm buitendiameter verbindingen

#### Table 1 – MINISPACE­R Adapter Particle Size and Dosing Characteristics

Tabla 1 – Características del tamaño de las partículas y de la dosificación del adaptador MINISPACE­R

Tableau 1 – Caractéristiques de l’adaptateur MINISPACE­R – Taille des particules et dosage

Tabella 1 – Dimensione delle particelle e caratteristiche di dosaggio dell’adattatore MINISPACE­R

Tabelle 1 – MINISPACE­R Adapter: Partikelgröße und Dosiereigenschaften

Tabel 1 – Deeltjesgrootte- en toedieningskenmerken van de MINISPACE­R adapter

Drug Tested	Ventolin** HFA	Atrovent** HFA	QVAR** 80
Labeled Metered Dose per Actuation (µg from valve) <p>Dosis medida etiquetada por actuación (µg de válvula) Indiqué comme inhalateur-doseur par déclenchement (µg provenant de la valve) Dose predefinita per somministrazione indicata in etichetta (µg dalla valvola) Ausgewiesene Dosiermenge pro Aktivierung (µg aus Ventil) Op etiket vermelde dosis per inwerkingstelling (µg vanuit ventiel)</p>	120	21	100
Particle Size (MMAD) µm ± SD <sup>2</sup> <p>range of measurements<sup>3</sup> Tamaño de partícula (MMAD) µm ± SD Taille des particules (DAMM) en µm ± ET Dimensione particelle (MMAD), µm ± DS Partikelgröße (MMAD) µm ± SD Deeltjesgrootte (MMAD) µm ± SD</p>	2.19 +/- 0.11 <p>2.08 – 2.30</p>	0.92 +/- 0.06 <p>0.88 – 0.99</p>	1.18 +/- 0.11 <p>1.11 – 1.30</p>
Geometric Standard Deviation µm ± SD <p>range of measurements Desviación estándar geométrica Écart type géométrique Deviazione standard geometrica Geometrische Standardabweichung Geometrische standaarddeviatie</p>	1.53 +/- 0.06 <p>1.49 – 1.60</p>	1.74 +/- 0.03 <p>1.71 – 1.78</p>	1.58 +/- 0.03 <p>1.56 – 1.61</p>
Total Delivered Dose µg ± SD <p>range of measurements Dosis total administrada Dose administrée totale Dose totale rilasciata Verabreichte Gesamtdosis Totale toegediende dosis</p>	27.4+/- 5.4 <p>21.2 – 30.8</p>	2.82 +/- 0.52 <p>2.30 – 3.34</p>	20.6 +/- 3.3 <p>17.2 – 23.7</p>
Total Respirable Dose (< 5.8µm) µg ± SD <p>range of measurements Dosis total respirable (&lt; 5,8 µm) Dose respirable totale (&lt; 5,8 µm) Dose totale respirabile (&lt; 5,8 µm) Atembare Gesamtdosis (&lt; 5,8 µm) Totale inhaalerbare dosis (&lt; 5,8 µm)</p>	26.6 +/- 5.2 <p>20.8 – 30.0</p>	2.77 +/- 0.46 <p>2.29 – 3.23</p>	20.6 +/- 3.4 <p>17.0 – 23.7</p>
Respirable Fraction (<5.8 µm) % of valve label mean ± SD <p>range of measurements Fracción respirable (&lt; 5,8 µm) % de la etiqueta de la válvula Media ± DS Fraction respirable (&lt; 5,8 µm), en pourcentage de la valeur indiquée sur l'étiquette de la valve Moyenne ± ET Frazione respirabile (&lt; 5,8 µm), % della dose indicata sull'etichetta della valvola Media ± DS Atembare Fraktion (&lt; 5,8 µm) % des Ventiltyps Mittelwerte ± SD Inhaalerbare fractie (&lt; 5,8 µm) % van op ventietiket vermelde waarde Gemiddelde ± SD</p>	22.2 +/- 4.3 <p>17.3 – 24.8</p>	13.2 +/- 2.2 <p>10.9 – 15.4</p>	20.6 +/- 3.4 <p>17.0 – 23.7</p>

Mass Fraction of Total Delivered Dose <p>Fracción de masa de la dosis total administrada Fraction massique de la Dose administrée totale Frazione ponderale della Dose totale rilasciata Massefraktion der verabreichten Gesamtdosis Massafractie van totale toegedi-ende dosis</p>	Coarse Particles (> 4.7 µm) <p>Partículas gruesas (&gt; 4,7 µm) Particules grossières (&gt; 4,7 µm) Particelle grossolane (&gt; 4,7 µm) Grobe Partikel (&gt; 4,7 µm) Grove deeltjes (&gt; 4,7 µm)</p>	4.18 <span> </span> %	2.90 <span> </span> %	0.34 <span> </span> %
	Fine Particles (1.1 - 4.7 µm) <p>Partículas finas (1,1 - 4,7 µm) Particules fines (1,1 - 4,7 µm) Particelle fini (1,1 - 4,7 µm) Feine Partikel (1,1 - 4,7 µm) Fijne deeltjes (1,1 - 4,7 µm)</p>	88.34 <span> </span> %	24.38 <span> </span> %	45.26 <span> </span> %
	Extra-Fine Particles (< 1.1 µm) <p>Partículas ultrafinas (&lt; 1,1 µm) Particules ultrafines (&lt; 1,1 µm) Particelle ultra-fini (&lt; 1,1 µm) Extrafeine Partikel (&lt; 1,1 µm) Extra fijne deeltjes (&lt; 1,1 µm)</p>	7.48 <span> </span> %	72.72 <span> </span> %	54.40 <span> </span> %

<sup>[1]</sup> Drug Tested / Medicamento probado / Médicament soumis à l’essai / Farmaco testato / Geprüftes Arzneimittel / Onderzocht geneesmiddel

<sup>[2]</sup> SD (Standard Deviation) / DS (Desviación estándar) / ET (Écart type) / DS (Deviazione standard) / SD (Standardabweichung) / SD (Standaarddeviatie)

<sup>[3]</sup> Range of measurements / Rango de medidas / Plage des mesures / Intervallo delle misurazioni / Messbereich / Spreiding van metingen

<sup>[4]</sup> trademarks and registered trademarks of their respective companies.

The MINISPACE­R dual-spray adapter was evaluated for particle size and dosing characteristics using an 8 stage cascade impactor. The MINISPACE­R was connected to the cascade impactor with ventilator tubing, wye and an endotracheal (ET) tube as they would be used in a ventilator circuit. Air was drawn through the assembly at a flow rate of 28.3 l/min. The aerosol samples exited the ET tube into the cascade impactor and comprised the Total Delivered Dose.

REF 1024 22 mm O.D. / O.D. – Installed 6 inches upstream of the wye in the inspiratory limb of a 22 mm circuit

El adaptador MINISPACE­R con nebulizador dual fue evaluado en cuanto a las características del tamaño de las partículas y de la dosificación utilizando un impactador en cascada de 8 etapas. El MINISPACE­R fue conectado al impactador en cascada con el tubo del ventilador, la pieza Y y el tubo endotraqueal (ET) de la forma en que se utilizarían en un circuito de ventilación. El aire fue extraído a través del circuito a una velocidad de flujo de 28,3 l/min. Las muestras del nebulizador abandonaron el tubo ET para entrar en el impactador en cascada y constituían la Dosis Total Administrada.

REF 1024 de 22 mm de D.E. – Instalado aproximadamente 15 cm corriente arriba de la pieza Y en el lado inspiratorio de un circuito de 22 mm

L’adaptateur à double pulvérisation MINISPACE­R a été évalué en utilisant un impacteur en cascade à 8 étages pour déterminer ses caractéristiques (taille des particules et dosage). Le MINISPACE­R a été raccordé à l’impacteur en cascade, la tubulure de ventilateur, la pièce en Y et la sonde endotrachéale (ET) étant configurées comme pour un circuit de ventilateur. On a fait passer de l’air à travers l’assemblage par aspiration à un débit de 28,3 l/min. Les échantillons d’aérosols sortant de la sonde ET ont pénétré dans l’impacteur en cascade, représentant la Dose administrée totale.

RÉF. 1024 22 mm DE – Installé 15 cm (6 pouces) en amont de la pièce en Y dans la branche inspiratoire d’un circuit de 22 mm

La dimensione delle particelle e le caratteristiche di dosaggio dell’adattatore dual-spray MINISPACE­R sono state valutate utilizzando un impattore a cascata a 8 stadi. MINISPACE­R è stato collegato all’impattore a cascata attraverso i tubi di ventilazione, il raccordo a Y e il tubo endotracheale (ET) nello stesso modo adoperato per un circuito di ventilazione. L’aria è stata convogliata attraverso il sistema con una velocità di flusso pari a 28,3 l/min. I campioni di aerosol in uscita dal tubo ET verso l’impattore a cascata costituiscono la Dose totale rilasciata.

Modello numero 1024, 22 mm D.E. – Installato a 15 cm (6 pollici) a monte del raccordo a Y nel braccio inspiratorio di un circuito da 22 mm

Der MINISPACE­R Dual-Spray Adapter wurde hinsichtlich der Partikelgröße und der Dosiereigenschaften mit einem 8-stufigen Impaktor geprüft. Der MINISPACE­R wurde mit einem Beatmungsschlauch, einem Y-Stück und einem Endotrachealschlauch (ET-Schlauch), wie sie auch in einem Beatmungskreis verwendet werden würden, an den mehrstufigen Impaktor angeschlossen. Mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 28,3 l/Min. wurde Luft durch die Anordnung gesaugt. Die Aerosol-Proben verließen den ET-Schlauch in den mehrstufigen Impaktor und bildeten die verabreichte Gesamtdosis.

REF 1024 22 mm AD / AD. – 15 cm oberhalb des Y-Stücks im inspiratorischen Schenkel eines 22-mm-Kreissystems installiert.

De deeltjesgrootte- en toedieningskenmerken van de MINISPACE­R dual-spray adapter werden beoordeeld met een achtraps-cascade-impactor. De MINISPACE­R werd aangesloten op de cascade-impactor met beademingsslang, een Y-stuk en een endotracheale (ET) tube zoals deze zouden worden gebruikt in een beademingscircuit. Door de opstelling werd lucht gevoerd met een stroomsnelheid van 28,3 l/min. De aerosolmonsters kwamen vanuit de ET tube in de cascade-impactor en omvatten de totale toegediende dosis.

REF 1024 22 mm buitendiameter – Wordt geplaatst 6 inch vóór het Y-stuk in het inhalatiegedeelte van een circuit van 22 mm